





Ref. 5021- 5022

## CARACTERISTICAS GENERALES

Sencillez en el manejo es lo que define esta línea de autoclaves en sus dos versiones de 11 y 22 litros. Adaptados a la normativa de los fabricantes de instrumental y aparatología.

- Cinco Programas, 4 de esterilización y 1 de desinfección.
- Pantalla de LCD controlada por microprocesador que indica el tiempo real de cualquier proceso así como cualquier incidencia.
- Lectura de programas en seis idiomas..
- Doble tanque de agua destilada lo que evita la recirculación del agua destilada.
- Bomba de prevacío y post vacío, con lo que se consigue evitar burbujas de aire para un esterilizado completo y un posterior vacío que permite un secado completo, libre de bacterias mediante filtro bacteriológico.
- Duración de los ciclos:  
 -134° C :3 minutos - 134° C :15 minutos / 12 minutos de secado - 121° C :30 minutos / 12 minutos de secado  
 -121° C :13 minutos -105° C : 30 minutos / desinfección.
- 2 Bandejas
- 1 Portabandejas.
- 1 Portasobres
- 1 Mangueras para desagüe.
- 1 Maneta extractora de bandejas
- Adaptador para impresora PC.

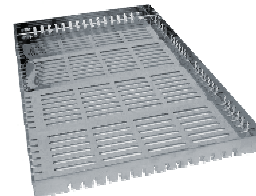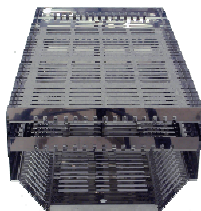

Fabricado bajo directivas CE

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	Peso.	Consumo	Diámetro cámara	Profundidad cámara
5021	11 L.	480 x 380 x 520mm.	38 Kg.	660 W.	Ø200 mm.	340 mm.
5022	22 L.	530 x 430 x 600mm.	56 Kg.	900 W.	Ø250 mm.	470 mm.

Cesto	Cestos de chapa ciega		
		<b>Ø x Long</b>	<b>Ref.</b>
	Inox	Ø220x220mm.	<b>CE 001</b>
	Inox	Ø280x280mm.	<b>CE 002</b>
	Inox	Ø380x380mm.	<b>CE 003</b>
	Inox	Ø280x200mm	<b>CE 004</b>
Cesto	Cestos de chapa perforada		
		<b>Ø x Long</b>	<b>Ref.</b>
	Inox	Ø220x220mm.	<b>CE 005</b>
	Inox	Ø280x280mm.	<b>CE 006</b>
	Inox	Ø380x380mm.	<b>CE 007</b>
	Inox	Ø280x200mm	<b>CE 008</b>
Cesto	Cestos de malla inox.		
		<b>Ø x Long</b>	<b>Ref.</b>
	Inox	Ø220x220mm.	<b>CE 009</b>
	Inox	Ø280x280mm.	<b>CE 010</b>
	Inox	Ø380x380mm.	<b>CE 011</b>
	Inox	Ø280x200mm	<b>CE 012</b>