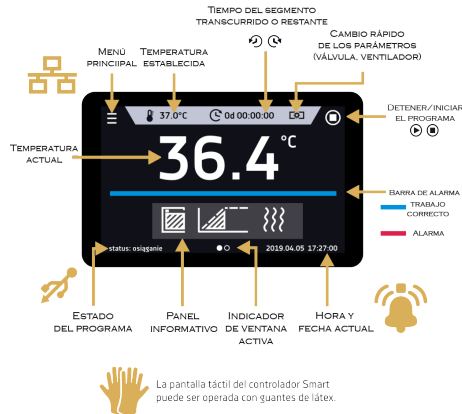




www.bunsen.es

ESTUFAS DE SECADO



ESTUFA DE AIRE FORZADO 15L.

Ref. 8307

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
- * Puerta sólida, provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
- * Protección contra sobretemperatura clase 2.0 según DIN 12880.
- * Puerto USB y LAN. Resolución 0.1°C.
- * Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
 - * Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.
 - * Función de bucle hasta 255 veces o sin fin. Rampas de calentamiento ajustables.
 - * Repetición de un ciclo de trabajo hasta 99 veces o indefinidamente.
 - * Función de retardo de inicio.
 - * Visualización de los parámetros durante el proceso.
 - * Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
 - * Registro del valor mínimo, medio y máximo de la temperatura de cada segmento.
 - * Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
 - * Función de auto-diagnóstico.
 - * Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
 - * Sistema de control de fallo de la alimentación (el programa continúa después de restaurar la energía).



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254





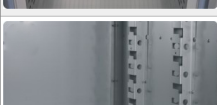
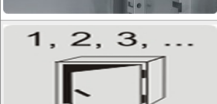


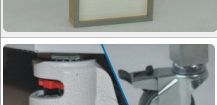
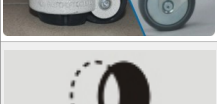
info@bunsen.es - www.bunsen.es



- * Control de velocidad del ventilador para 0...100%; 10...100%.
- * Memoria interna capaz de almacenar hasta 2046 registros.
- * Apagado automático del ventilador una vez terminado el programa.
- * Control automático de la válvula de aire.
- * Bandejas de alambre incluidas 1, posibilidad de colocar 2. Carga 10 kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom (W)
8307	15L.	510 x 550 x 470mm.	320 x 230 x 200mm.	27 Kg.	Hasta 300°C	700

Ref	Accesorios	
8300-01		Puerta con ventana
8300-02		Bandeja rejilla
8300-03		Bandeja Perforada
8300-04		Bandeja rejilla reforzada
8300-05		Carriles reforzados
8300-06		Contador de puerta abierta
8300-08		Base con ruedas (según modelos)
8300-09		Filtro EPA
8300-10		Ruedas diferentes tipos
8300-11		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

