



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

## INCUBADORES serie Plus



## INCUBADOR CONVECCION NATURAL 180L. Ref. 8013 Plus

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
- \* Puerta sólida (opcional con ventana), provista de llave. Excelente aislamiento térmico.
- \* Protección contra sobret temperatura clase 3.1 según DIN 12880.
- \* Pantalla táctil grande (7"), en color, que proporciona las siguientes opciones al usuario:
  - \* Comunicación y transferencia de datos por: LAN, USB, WiFi.
  - \* Perfil de multisegmentos de tiempo-temperatura (100 segmentos).
  - \* Función de retardo de inicio ajustable, rampas ajustables.
  - \* Función de bucle hasta 255 veces o sin fin.
  - \* Hasta 100 segmentos de perfil temperatura tiempo.
  - \* Registro de valor mínimo, medio y máximo de temperatura y humedad para cada segmento.
  - \* Visión de conjunto y de los parámetros actuales durante el funcionamiento.
  - \* Posibilidad de operación con la prioridad de temperatura o tiempo.
  - \* Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
  - \* Sistema de control de fallo de energía (el programa continúa después de restaurar la energía).
  - \* Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
  - \* Señalización visual y sonora de exceder la temperatura establecida.
  - \* Función de administrador que permite gestionar las cuentas de los usuarios.
  - \* Control de acceso protegido a través de la contraseña.
  - \* Función de auto diagnóstico del equipo.



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254

[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

Más incubadores



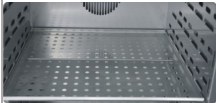

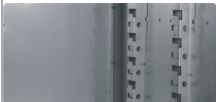




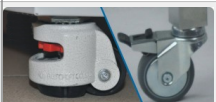
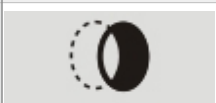


Other incubators

- \* Barra de Alarma – información visual rápida sobre el estado del equipo.
- \* Quick Note – usuario puede guardar una nota (hasta 50 caracteres) en la memoria del controlador.
- \* Quick Change – cambio rápido de parámetros: temperatura, humedad, tiempo, etc.
- \* Bandejas de alambre incluidas 3, posibilidad de colocar 9. Carga 25 kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom, (W)
<b>8013P</b>	180L.	650 x 1030 x 820mm.	470 x 720 x 560mm.	94 Kg.	Hasta 100°C	650

Ref	Accesorios	
<b>8300-01</b>		Puerta con ventana
<b>8300-02</b>		Bandeja rejilla
<b>8300-03</b>		Bandeja Perforada
<b>8300-04</b>		Bandeja rejilla reforzada
<b>8300-05</b>		Carriles reforzados
<b>8300-06</b>		Luz led interior
<b>8300-07</b>		Base con ruedas
<b>8300-08</b>		Sonda adicional PT-100
<b>8300-09</b>		Filtro EPA
<b>8300-10</b>		Ruedas diferentes tipos
<b>8300-11</b>		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

